

Pasta refractaria

HUGE

— *Pequeño Soporte, Gran Protección*


NUEVO
Producto



FDA listed | CE

Presentación: 10 ml


La **pasta refractaria Huge** es un material de alto rendimiento, listo para usar y diseñado para preparar de forma rápida y sencilla bandejas de cocción individuales para una amplia variedad de restauraciones de cerámica y zirconio. Su textura cremosa proporciona estabilidad y protección durante los ciclos de cocción a alta temperatura. Así se evitan desplazamientos, deformaciones o alteraciones del color de la restauración.

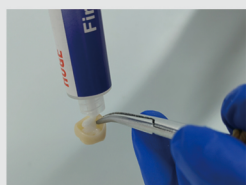

Aplicar sobre la superficie interna de la restauración / Sobre la parte superior del pin.



Introducir el pin de cocción en la corona.

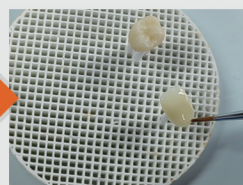

Maquillar y glasear la superficie de la restauración.



Colocar sobre la bandeja de cocción.



Introducir en el horno de cerámica.



Retirar los residuos de pasta refractaria tras la cocción.

Nota:

Aplicar en cada uso una cantidad aproximada al tamaño de un guisante pequeño. La pasta refractaria no debe entrar en contacto con la superficie glaseada de la restauración, ya que podría afectar al resultado del maquillaje y el glaseado.

Características principales

✓ Aplicación sencilla

✓ Estabilidad a altas temperaturas

✓ Retirada de la pasta sin dejar residuos

✓ Sujeción firme

✓ Conservación de la estética de la restauración

✓ Calidad certificada

Fácil de aplicar y retirar, ofrece un alto rendimiento a un precio competitivo.