

NEW

Los TADs VL son mini tornillos diseñados específicamente para el anclaje fijo vestibular o lingual de dispositivos adecuados o para el uso de segmentos de alambre y/o resortes para favorecer el movimiento de los dientes mediante tracción ortodóncica. Fabricados en titanio medical grado 5, gracias a la punta autorroscante y a la particular geometría de la rosca con diámetro de 2 mm y longitud de 8 mm, garantizan un procedimiento quirúrgico simple, mínimamente invasivo y una excelente estabilidad primaria.

**TAD VL
CON DOBLE SLOT**

FABRICADO EN TITANIO MEDICAL GRADO 5

**TAD VL
CON BOTÓN**

FABRICADO EN TITANIO MEDICAL GRADO 5



**BOTÓN
Y ORIFICIO PASANTE**
PARA AGILIZAR LA APLICACIÓN
DE CADENITAS, ELÁSTICOS, ETC.

ESPIRA AUTORROSCANTE
GARANTIZA UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO SIMPLE Y
UNA ÓPTIMA ESTABILIDAD PRIMARA



**ENVASE ESTÉRIL
CON TAPÓN PORTAIMPLANTE**
EN CÓDIGO COLOR EN RELACIÓN A LA ALTURA
Y AL SOPORTE EN TITANIO

NEW




**TAD VL
CON DOBLE SLOT**

La cabeza del mini tornillo está disponible en dos alturas transmucosas (cabeza baja y cabeza alta) y presenta un doble slot cerrado para aplicar segmentos de alambres y/o resortes. La sección del doble slot es de 0.19" x 0.25" y puede acoger alambres redondos o rectangulares. El procedimiento quirúrgico, mínimamente invasivo, se realiza en una fase, es transmucoso y tiene una óptima estabilidad primaria para la inmediata aplicación de la tracción ortodóncica. Los TADs VL de doble slot se suministran estériles para utilizar con los apropiados accesorios e instrumentos quirúrgicos Leone.

Envase: 1 pieza

	∅	L	
	mm	mm	
		8	005-2008-13
	2		
		8	005-2008-14

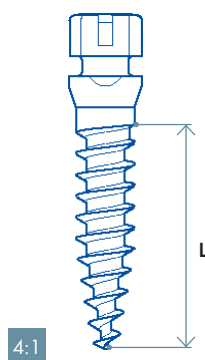

DOBLE SLOT
EN CRUZ



NEW




**TAD VL
CON BOTÓN**

La cabeza del mini tornillo está disponible en dos alturas transmucosas (cabeza baja y cabeza alta), con forma de botón y agujero pasante para agilizar la aplicación de tracciones elásticas y resortes en espiral. El procedimiento quirúrgico, mínimamente invasivo, se realiza en una fase, es transmucoso y tiene una óptima estabilidad primaria para la inmediata aplicación de la tracción ortodóncica. Los TADs VL con botón se suministran estériles para utilizar con los apropiados accesorios e instrumentos quirúrgicos Leone.

Envase: 1 pieza

	∅	L	
	mm	mm	
		8	005-2008-11
	2		
		8	005-2008-12

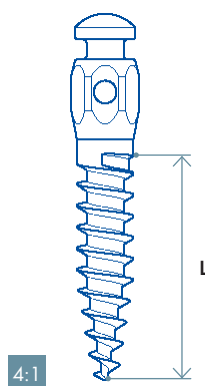

BOTÓN
Y AGUJERO PASANTE



090-1134-00 090-1334-00

1:1



∅	1,1 mm	1,3 mm
L	9 mm	12 mm

**FRESAS
PARA TADS**

Fabricadas en acero inoxidable. Permiten realizar un agujero piloto en caso de densidad ósea elevada.

Envase: 1 pieza



**080-1001-00
MUCOTOMO
PARA TAD VL**

Fabricado en titanio medical grado 5. La hoja con un diámetro de 2.2 mm permite realizar una adecuada incisión en la mucosa adyacente. Se coloca en el atornillador para adaptadores (REF 080-1000-00). Esterilizable en autoclave.

Envase: 1 pieza



**080-1001-01
BISTURÍ CIRCULAR
PARA PIEZA DE MANO**

Fabricado en titanio medical grado 5. La hoja con un diámetro de 2.2 mm permite realizar una adecuada incisión en la mucosa adyacente utilizando el contrángulo. Esterilizable en autoclave.

Envase: 1 pieza



**080-1002-00
RACOR
PARA PIEZA DE MANO
PARA TAD VL
CON BOTÓN**

Fabricado en acero inoxidable con anillo de elastómero azul. Permite la inserción del TAD VL con botón utilizando el contrángulo, también en áreas de difícil acceso. Esterilizable en autoclave.


Envase: 1 pieza



**080-1002-01
RACOR
PARA PIEZA DE MANO
PARA TAD VL
CON DOBLE SLOT**

Fabricado en acero inoxidable con anillo de elastómero gris. Permite la inserción del TAD VL con doble slot utilizando el contrángulo también en áreas de difícil acceso. Esterilizable en autoclave.

Envase: 1 pieza

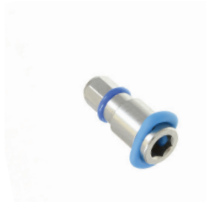

080-1003-00
RACOR PARA
ATORNILLADOR Y CARRACA
PARA TAD VL CON BOTÓN

Fabricado en acero inoxidable con anillo de elastómero azul.
Permite la inserción del TAD VL con botón en zonas posteriores o de difícil acceso utilizando el atornillador manual quirúrgico (REF 156-1001-01) o la carraca (REF 156-1014-00). Esterilizable en autoclave.
Envase: 1 pieza



156-1001-01
ATORNILLADOR MANUAL

Fabricado en titanio medical grado 5. Permite atornillar y destornillar el TAD VL con botón utilizando el racor para atornilladores y carraca (REF 080-1003-00). Presenta un orificio para la colocación del hilo de seguridad. (Producto del Catálogo del Sistema de Implantes Leone). Esterilizable en autoclave.
Envase: 1 pieza



156-1014-00
CARRACA


Fabricada en titanio medical grado 5. Permite atornillar y destornillar el TAD VL con botón utilizando el racor para atornilladores y la carraca (REF 080-1003-00). No debe desmontarse. (Producto del Catálogo del Sistema de Implantes Leone). Esterilizable en autoclave.
Envase: 1 pieza



1:2

080-1000-00
ATORNILLADOR
PARA ADAPTADORES


Fabricado en aluminio. Permite atornillar y destornillar los TADs manualmente utilizando diferentes adaptadores. Esterilizable en autoclave.
Envase: 1 pieza

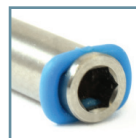

1:1

080-1000-22
ADAPTADOR PARA
TAD VL CON BOTÓN

Fabricado en acero inoxidable con anillo de elastómero azul. Permite atornillar y destornillar el TAD VL con botón manualmente con el atornillador para adaptadores (REF 080-1000-00). Esterilizable en autoclave.
Envase: 1 pieza

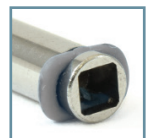

1:1

080-1000-23
ADAPTADOR PARA
TAD VL CON DOBLE SLOT

Fabricado en acero inoxidable con anillo de elastómero gris. Permite atornillar y destornillar el TAD VL con doble slot manualmente con el atornillador para adaptadores (REF 080-1000-00). Esterilizable en autoclave.
Envase: 1 pieza

070-0001-06
KIT QUIRÚRGICO
PARA TADs VL

NEW

Fabricado en material plástico PPSU, se ideó para esterilizar y disponer durante el procedimiento quirúrgico de los instrumentos necesarios para la inserción de los TADs VL, tanto con el contrángulo como con los instrumentos manuales.

El kit quirúrgico presenta una tapa abatible que, una vez abierta, se inclina para agilizar el acceso a los instrumentos fijados firmemente sobre soportes de silicona en la bandeja.

El kit está compuesto por 6 instrumentos (puede contener hasta 13 piezas)

- atornillador para adaptadores
- adaptador para TAD VL con botón
- adaptador para TAD VL con doble slot
- racor para pieza de mano para TAD VL con botón
- racor para pieza de mano para TAD VL con doble slot
- racor para atornillador y carraca para TAD VL con botón

Totalmente esterilizable en autoclave.



NEW

070-0001-00
KIT VACÍO

