

# única proximal

in cooperation with  
STYLE ITALIANO™

## ¡Nueva!

céntrese en lo proximal  
céntrese en la forma

### Ventajas

reproduce fielmente los contornos  
labial, palatino y proximal

forma y contorno universales  
para mesial y distal, superior  
e inferior que simplifican y  
aceleran significativamente las  
restauraciones anteriores

permite una visión y un acceso al  
campo operatorio sin obstrucciones  
incluso cuando se colocan varias  
matrices al mismo tiempo

autoestabilizante

extensiones cervicales más largas  
en comparación con las matrices  
seccionales posteriores

disponible en dos tamaños para  
adaptarse mejor a diferentes  
morfologías de incisivos

matrices  
anteriores

 polydentia  
swiss manufacture +

 Katia  
Dental



# ¡Nueva!

# única proximal

## matrices anteriores



céntrese en lo proximal  
céntrese en la forma

### Testimonial



"Para lograr la predictibilidad en las restauraciones anteriores directas con composite, necesitamos una solución inteligente, simple, única y rentable, especialmente en lo que respecta a la construcción del contorno y la forma externa de la restauración. Unica Proximal resuelve los problemas de las matrices anteriores, ofreciendo una fácil colocación de la matriz, la autoestabilización sin cuñas y la predicción del contorno exterior, ya que se ajusta perfectamente a los dientes anteriores restaurados sin exceso de matriz en sentido labial y palatino. Se puede utilizar fácilmente para casos de Clase III y IV, diastemas, modificación de forma y aplicación de carillas de composite. Unica Proximal es una solución inteligente para las restauraciones anteriores directas estéticas y funcionales en el día a día."

Dr. Osama Shaalan,  
Palestina



Por cortesía del Dr. Osama Shaalan




para más información

MATRIZ SECCIONAL POSTERIOR TRADICIONAL

V S

UNICA PROXIMAL MATRIZ ANTERIORE

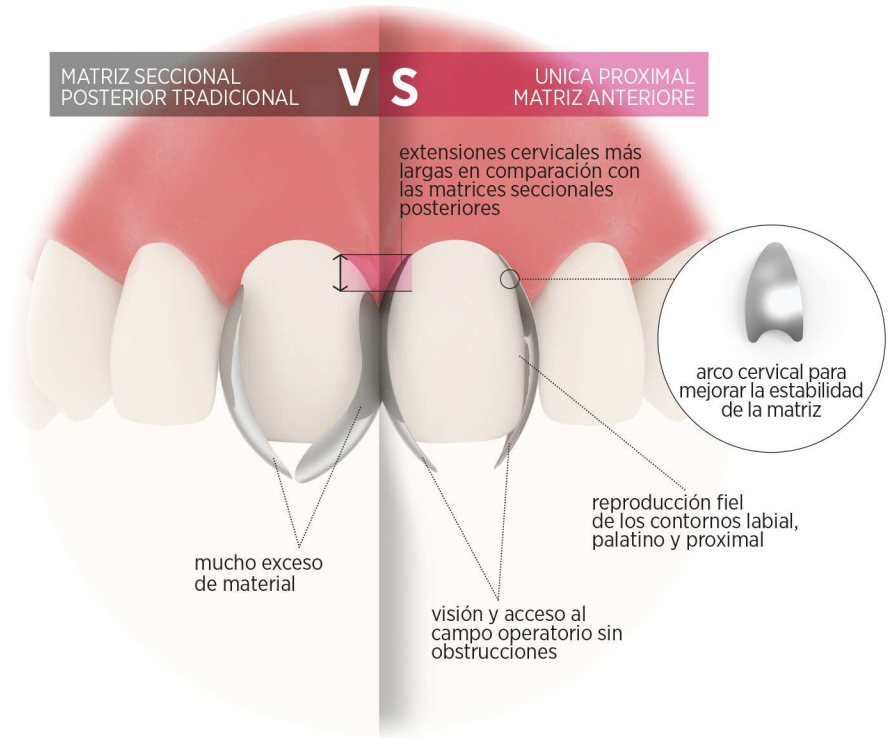


Unica Proximal ofrece un control mejorado sobre las restauraciones anteriores. Esta nueva matriz anterior elimina la necesidad de cortar o modificar las matrices seccionales posteriores existentes proporcionando una forma que se adapta, encaja y asegura fácilmente en la región anterior y elimina la extensión innecesaria de la matriz tradicional posterior.



mirar el video

única proximal

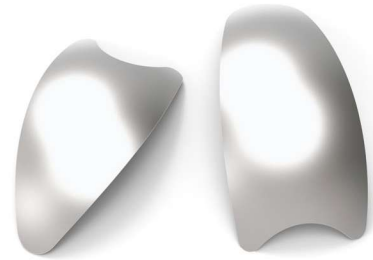

única proximal deep

Unica Proximal son matrices de acero inoxidable disponibles en 0,03 mm de grosor y dos formas (estándar y profunda) diseñadas para adaptarse al contorno de los dientes anteriores en sentido labial, palatino y proximal. Las matrices Unica Proximal están especialmente indicadas para restauraciones anteriores que afectan a las paredes proximales (Clase III y IV, incisivos laterales en clavija, cierre de diastemas, aplicación de carillas parciales y totales). Unica Proximal Deep está diseñada para aplicaciones periodontales con papila plana. Fácil de fijar en su sitio, el arco labio-palatino cervical tiene como objetivo de aumentar la estabilidad de la matriz una vez colocada. El uso de una cuña para fijar la matriz está permitido pero no es obligatorio.

La forma optimizada para adaptarse a los dientes anteriores mejora la visión y el acceso al campo operatorio en comparación con otras soluciones como la matriz seccional posterior.

**Unica Proximal matrices anteriores - REF 6913**  
standard 0.03mm, 100 uds.

**Unica Proximal matrices anteriores - REF 6914**  
standard 0.03mm, 50 uds.

**Unica Proximal deep matrices anteriores - REF 6952**  
deep 0.03mm, 100 uds.

**Unica Proximal deep matrices anteriores - REF 6953**  
deep 0.03mm, 50 uds.

