


myQuickmat Prime

nuevo!

be a
flamingo
in a flock
of pigeons

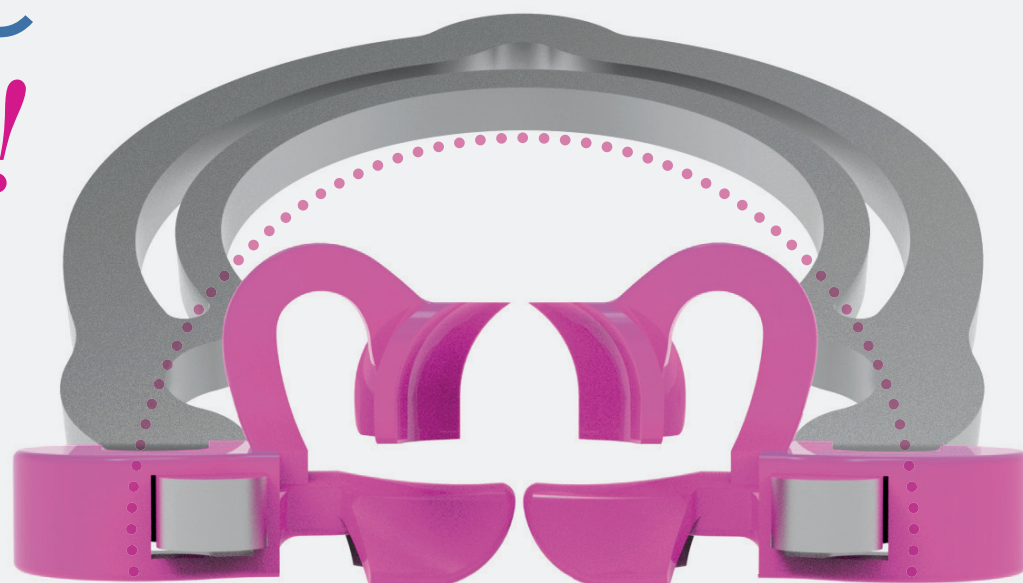

Ventajas

sistema posterior simplificado
que reduce el tiempo de la
intervención

elementos esenciales de
restauración: un único anillo, una
única extremidad del anillo con
cuñas integradas y una única
matriz anatómica (no requiere
uña aparte)

extremidades autocentrantes en
forma de uña: guían de forma
natural la inserción garantizando
una separación bilateral eficaz de
los dientes adyacentes con una
adaptación óptima de la matriz y
el sellado cervical

estabilidad del anillo: evita que el
anillo se salga

la matriz abombada de cervical
a oclusal permite posicionar con
precisión el punto de contacto
cerca del ecuador

sin comprometer la eficacia ni el
rendimiento: el resultado es una
restauración más fácil y natural de
la anatomía proximal



diga
adiós
a las
cuñas



myTines
Prime
flamingo shaped

extremidades
con cuñas
integradas



polydentia
swiss manufacture 

sistemas
de matrices
seccionales

nuevo! myQuickmat Prime



diga adiós
a las cuñas

Testimonial



"myRing Prime es un concepto revolucionario que no sólo simplifica el protocolo de las restauraciones posteriores de Clase II, sino que también lo facilita y lo acelera. Conseguir la curvatura adecuada del contacto proximal siempre ha sido un reto con las restauraciones de Clase II, pero con la nueva combinación Quickmat Prime y myRing Prime, nunca ha sido tan fácil ni tan rentable. En resumen, ha revolucionado mis procedimientos de restauración de Clase II."

Dr. Javier Tapia,
España



Cortesía del Dr. Javier Tapia, España



para más
información

las puntas
conforman
eficazmente la
matriz en las
paredes
proximales



flamingo
shaped

myTimes
Prime

extremidades en forma
de cuña reutilizables
y autoclavables para
myRing Prime

CUÑAS INTEGRADAS
BILATERALES

- autocentrado: guía natural de inserción
- separar eficazmente los dientes adyacentes
- forman la matriz en las paredes cervicales
- evita que el anillo se salga

myRing
Prime

anillo de matriz
seccional de
acero inoxidable

- anillo doblado para no interferir con los dientes adyacentes

Quickmat
Prime


matrices seccionales
anatómicas de
cervical a oclusal



- posición precisa del punto de contacto cerca del ecuador
- un único tamaño para premolares y molares
- lengüeta superior central para facilitar la colocación
- rígida pero fácil de pulir


Quickmat Prime

- anatomía curva natural
- punto de contacto cercano al ecuador

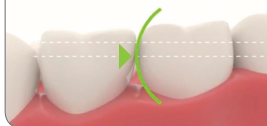

Matriz seccional tradicional

- anatomía del diente "recto"
- punto de contacto elevado

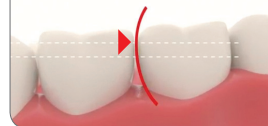

ver el
video

myQuickmat Prime es un sistema de matrices seccionales diseñado para simplificar el procedimiento de restauración de Clase II y reducir el tiempo de la intervención. Al eliminar la cuña del procedimiento restaurador, el sistema resulta más sencillo, rápido e inteligente que los tradicionales sistemas de matrices seccionales.

myQuickmat
Prime kit
REF 6890

- 2 uds. myRing Prime
- 10 pares myTimes Prime
- 100 uds. Quickmat Prime matrices



recambio

myRing Prime - REF 6891
2 uds. myRing Prime, 4 pares myTimes Prime

myTimes Prime - REF 6892
6 pares myTimes Prime

Quickmat Prime - REF 6893
100 uds. Matrices seccionales anatómicas

