
Sinterización rápida

HS, HT, GM, MM-4D

Coronas y puentes (≤7 unidades)

95 minutos

PASOS	Temperatura inicial (℃)	Temperatura final (℃)	Tiempo (min)	Velocidad de calentamiento (℃/min)
PASO 1	20	1050	13	80
PASO 2	1050	1300	42	6
PASO 3	1300	1550	25	10
PASO 4	1550	1550	15	Mantenimiento

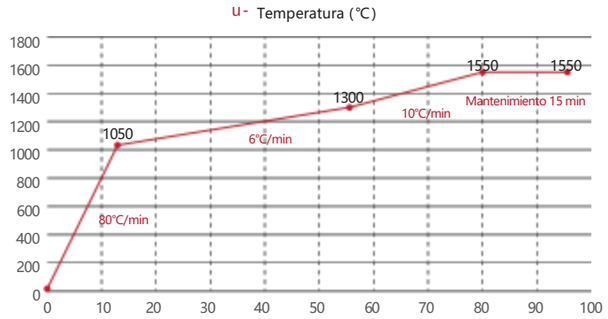


Sinterización rápida

MM-4D

Puentes (> 7 unidades)

383 minutos

PASOS				
PASO 1	20	1350	133	10
PASO 2	1350	1350	30	
PASO 3	1350	1500	50	3
PASO 4	1500	1500	120	Mantenimiento
PASO 5	1500	1000	50	-10

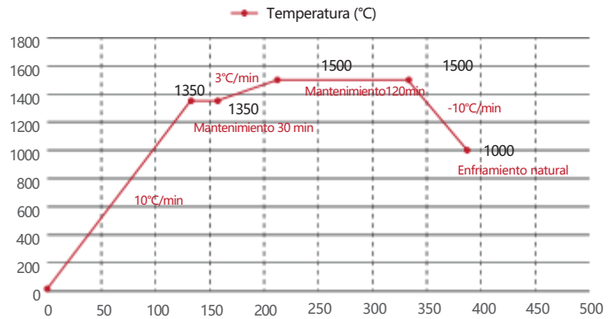


Sinterización rápida

HS, HT

Puentes (> 7 unidades)

393 minutes

PASOS				
PASO 1	20	1350	133	10
PASO 2	1350	1350	30	
PASO 3	1350	1530	60	3
PASO 4	1530	1530	120	Mantenimiento
PASO 5	1530	1000	50	-10

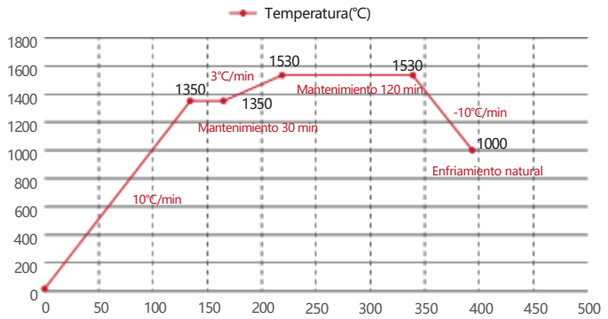

HUGE zirking

Zirconia Prime
Programa de sinterización

ISO 13485:2016

FDA cleared

CE 1639

Rev 01


Sinterización estándar

GM, MM-4D

Coronas y puentes (≤7 unidades)

403 minutos

PASOS	Temperatura inicial (℃)	Temperatura final (℃)	Tiempo (min)	Velocidad de calentamiento (℃/min)
PASO 1	20	1050	103	10
PASO 2	1050	1050	20	Mantenimiento
PASO 3	1050	1500	90	5
PASO 4	1500	1500	120	Mantenimiento
PASO 5	1500	800	70	-10

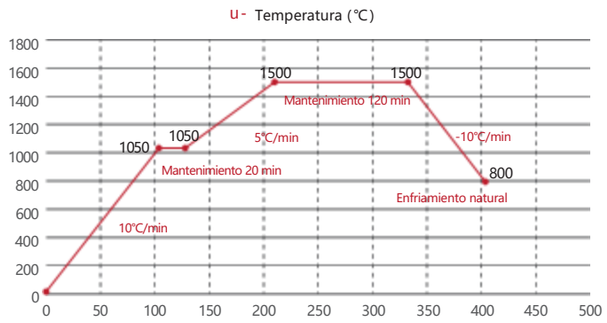


Sinterización estándar

GM, MM-4D

Puentes (> 7 unidades)

526 minutos

PASOS	Temperatura inicial (℃)	Temperatura final (℃)	Tiempo (min)	Velocidad de calentamiento (℃/min)
PASO 1	20	1050	206	5
PASO 2	1050	1050	20	Mantenimiento
PASO 3	1050	1500	90	5
PASO 4	1500	1500	120	Mantenimiento
PASO 5	1500	800	90	-8

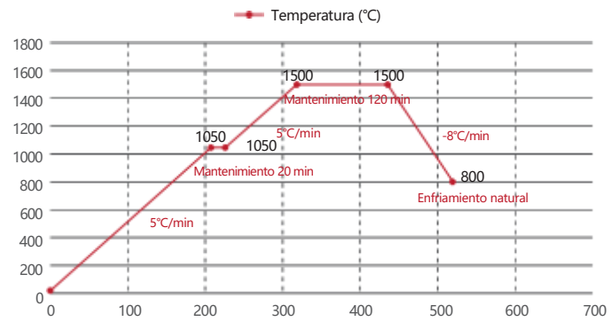


Sinterización estándar

HS, HT

Coronas y puentes (≤7 unidades)

412 minutos

PASOS	Temperatura inicial (℃)	Temperatura final (℃)	Tiempo (min)	Velocidad de calentamiento (℃/min)
PASO 1	20	1050	103	10
PASO 2	1050	1050	20	Mantenimiento
PASO 3	1050	1530	96	5
PASO 4	1530	1530	120	Mantenimiento
PASO 5	1530	800	73	-10

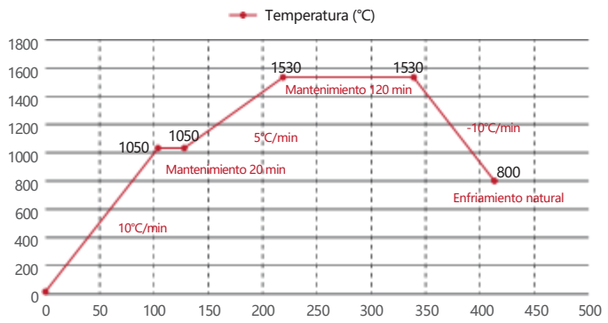

Sinterización estándar

HS, HT

Puentes (> 7 unidades)

534 minutos

PASOS	Temperatura inicial (℃)	Temperatura final (℃)	Tiempo (min)	Velocidad de calentamiento (℃/min)
PASO 1	20	1050	206	5
PASO 2	1050	1050	20	Holding
PASO 3	1050	1530	96	5
PASO 4	1530	1530	120	Holding
PASO 5	1530	800	92	-8

